


## Low vision working station

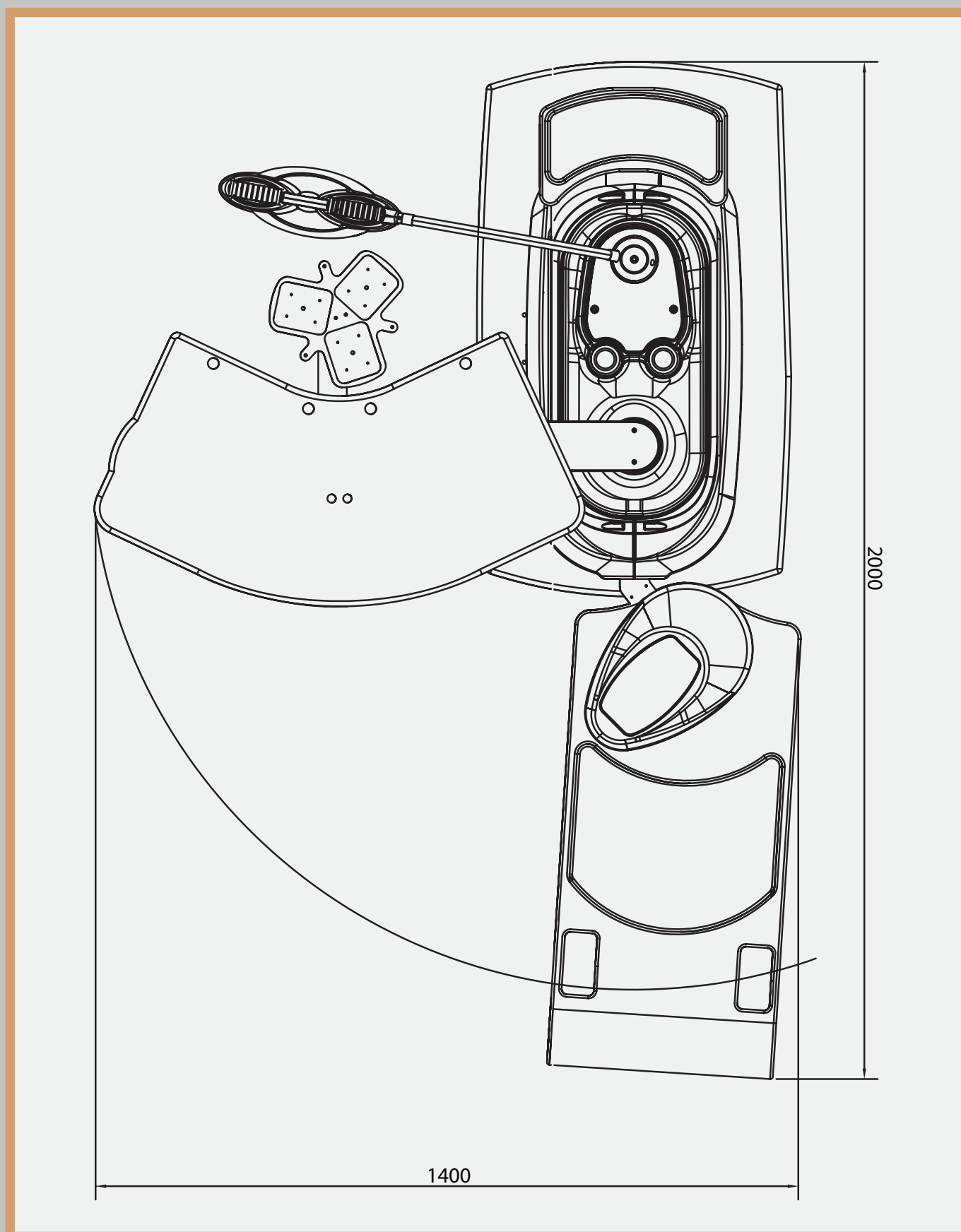

**SUBVISION**

Via Melchiorre Gioia, 66 - 20125 Milano (Italy) - Tel. +39 02 798868 - Fax +39 02 795870  
E-mail: [info@subvisionmilano.com](mailto:info@subvisionmilano.com) - <http://www.subvisionmilano.com>

**VISUAL PROJECT**  
innovation makes it easy

## Low vision working station



**[www.vpeurope.it](http://www.vpeurope.it)**

## All in one PC



- Touch screen
- Data Base Ipvisione interattivo
- Ottotipo digitale dedicato per la riabilitazione Visiva
- Applicativo RGB per la gestione del pannello luminoso
- Screen reader
- O.C.R. Istantaneo per la Riabilitazione Visiva
- Software ingrandente per la gestione del CCTV fisso (16 colori, autofocus)

## All in one PC

- Touch screen
- Low Vision interactive data base
- Dedicated optotype for Rehabilitation
- Software for management of the RGB-led panel
- Screen reader
- O.C.R. for visual rehabilitation and reading skill improvement
- Magnifying software for the management of the stand CCTV

## PANNELLO RGB-led



- Colorazione RGB a 3 temperature colore
- Personalizzazione delle lunghezze d'onda su richiesta del medico
- Ottotipi su acetato da 0,02 a 0,60 per la valutazione del PRL in uso (positivo e negativo)
- Adattamento pantoscopico

## RGB-led PANEL

- RGB colors based on three different Kelvin value
- Customized waves lenght based on doctor request
- Optotypes on acetate from 0.02 to 0.60 for the evaluation of PRL (positive and negative)
- Pantoscopic adaptation

## CCTV fisso



- Telecamera rotabile per le prove a distanza, vicino e a specchio
- Autofocus
- B&N, Colori reali, colori pastello, tendina, righelli, freeze, localizzatore telecomando

## Stand CCTV

- Camera with three different viewing mode for testing at distance, near and mirror
- Autofocus
- B&W, true colors, false colors, mask, rules, freeze and locator buttons
- Remote control

## O.C.R. istantaneo



- Telecamera collegata al software Open Book per una ripresa rapida (4") di una pagina formato A4
- Adattamento automatico dell'impaginazione (es. se viene ripreso un giornale il software riconosce le colonne in sequenza ordinata)
- Possibilità di riprendere le pagine di un libro (anche due alla volta se rientranti nel formato A4) con lettura in tempo reale e registrazione del testo per letture successive.

## IMMEDIATE O.C.R.

- Camera connected to the Open Book software for rapid recovery (4") of an A4 page
- Automatic organization of the scanned pages (e.g. if it is taken a newspaper column, the software recognizes and show the ordered sequence)
- Possibility of resuming the pages of a book (or two at a time when falling in A4 format) with realtime reading of the text and possibility to store books or documents for further reading.



## LAMPADE "3K"

- Lampade portatili (batteria ricaricabile) con diversa temperatura colore
- L'illuminazione proposta per prima, viene valutata durante la presa in carico con il pannello RGB-led

## KELVIN LAMPS

- Portable lights (rechargeable) with different color temperatures
- The lighting proposed as first one, is been evaluated during the RGB-led panel test


Cassetta portalenti (escluse)  
con simulatore IOL-Vip e IOL-K

*Trial lenses (not included) case  
with IOL-Vip and IOL-K simulator*



Vano porta documenti  
dei pazienti in visita  
*Patients folders holder*

Videoringranditore portatile 7"  
7" portable CCTV

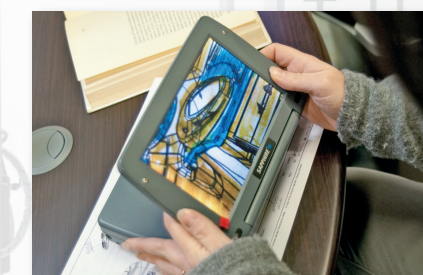

Lente di ingrandimento elettronica  
*Electronic magnifier*



Occhiali di prova IOL-K  
*IOL-K trial glasses*



Lenti di ingrandimento in  
materiale anallergico,  
con e senza illuminazione  
*Hand magnifiers in hypoallergenic  
material, with and without illumination*

